Versión de Prueba
Wondershare PDFelement

GUÍA DE USUARIO

MÁQUINA REDUCTORA MAGNÉTICA



Versión de Prueba
Wondershare PDFelement

Principio de tratamiento


Usando la tecnología HI-EMT (onda electromagnética enfocada de alta energía) para expandir y contraer continuamente los músculos autólogos y llevar a cabo un entrenamiento extremo se puede remodelar profundamente la estructura interna del músculo, es decir, dar crecimiento de las fibrillas musculares (aumento del músculo) y producir nuevas cadenas de proteínas y fibras musculares (hiperplasia muscular), para entrenar y aumentar la densidad y el volumen muscular. La contracción 100% de la tecnología HI-EMT puede desencadenar una gran cantidad

Versión de Prueba
Wondershare PDFelement


descomposición de grasa. Los ácidos grasos se descomponen de los triglicéridos y se acumulan en las células grasas. Las concentraciones de ácidos grasos son demasiado altas, lo que provoca la apoptosis de las células grasas, que es excretada por el metabolismo normal del cuerpo en unas pocas semanas. Por lo tanto, la máquina de belleza delgada puede fortalecer y aumentar los músculos y reducir la grasa al mismo tiempo.





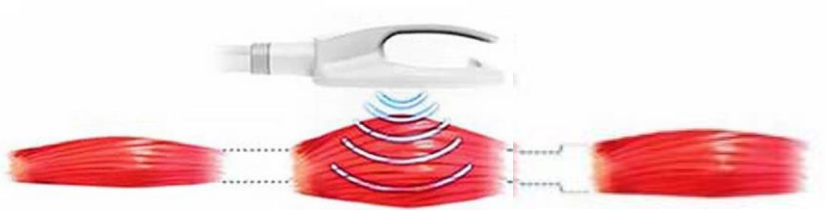

Antes Durante el tratamiento Después

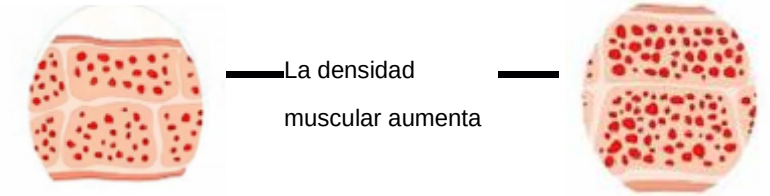


Ondas electromagnéticas enfocadas de alta energía (HI-EMT)

El campo electromagnético de HI-EMT puede apuntar a las células nerviosas motoras y generar el potencial de acción, que estimula directamente la contracción muscular. Se puede decir que "puede hacer ejercicio mientras está acostado".


En el curso de tratamiento de 30 minutos, el músculo se contrae 30000 veces con alta frecuencia e intensidad, ¡lo que no se puede lograr en el ejercicio general! La contracción final del músculo necesita una gran cantidad de suministro de energía, por lo que las células grasas al lado del músculo también son consumidas, lo que conduce a la apoptosis natural y la reducción efectiva del espesor de la grasa.

El movimiento muscular causado por HI-EMT no solo no causa daño a otras articulaciones o huesos del cuerpo, sino que también fortalece de manera efectiva los músculos abdominales o de la cadera, aumentando el número y el volumen de las fibras musculares: no solo haciendo que la línea del cuerpo sea más prominente con una "línea de sirena" y "línea de chaleco" mayores

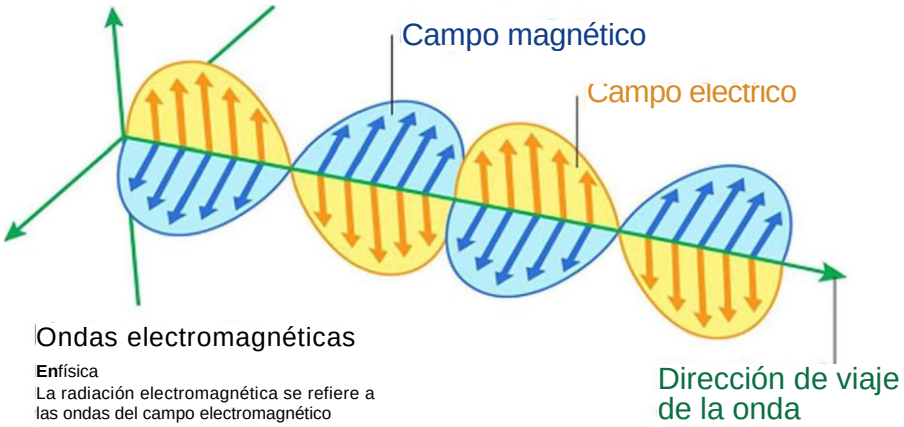


Versión de Prueba
Wondershare PDFelement

HI-EMT (ondas electromagnéticas enfocadas de alta energía) en lugar de HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad)

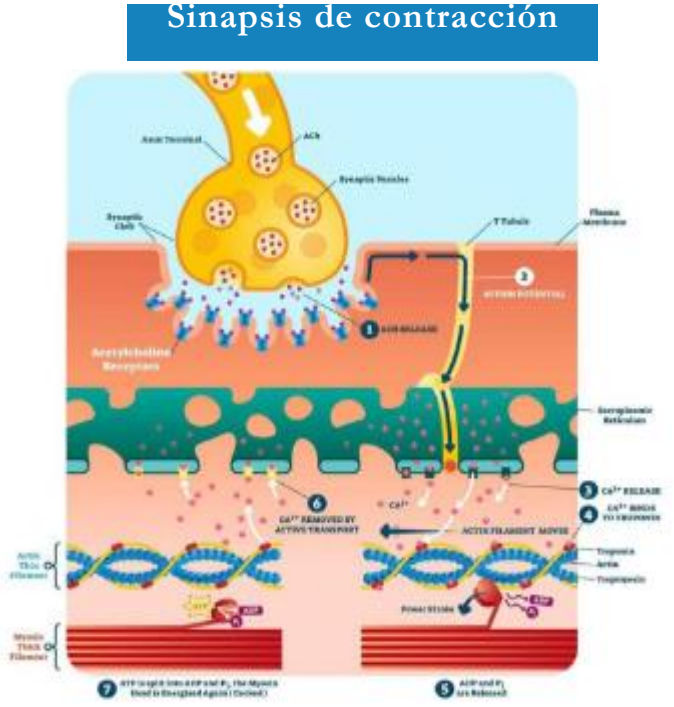

HI-EMT Atraviesa el cuerpo de forma no invasiva e interactúa con las motoneuronas. Las motoneuronas luego desencadenan grandes contracciones musculares debido a los potenciales de acción. El cerebro transmite información para estimular las motoneuronas. Estas contracciones de alta velocidad llevarán a fortalecimiento del músculo. La energía penetra el tejido mucular profundo en procedimientos diseñados para cada parte del cuerpo y con propósitos distintos, mejorando la estimulación y el entrenamiento muscular. Los músculos estimulados aumentan la circulación y queman calorías. Esto es como acostarse y realizar HIIT, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que producirá el efecto de autoquema de grasa. Además, desarrollar el crecimiento muscular mientras se quema grasa, un tratamiento a corto plazo puede ayudar a quemar muchas calorías y aumentar la tasa metabólica. para que puedas seguir perdiendo grasa incluso después de dormir.

HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad) es reconocido mundialmente como un método saludable y eficiente para reducir la grasa, que puede ayudar a las personas a quemar grasa rápidamente en un corto período de tiempo. Después de completar una serie de HIIT, su metabolismo puede aumentar rápidamente en 48 horas. Este método especial ha arrasado en el mundo desde su introducción.

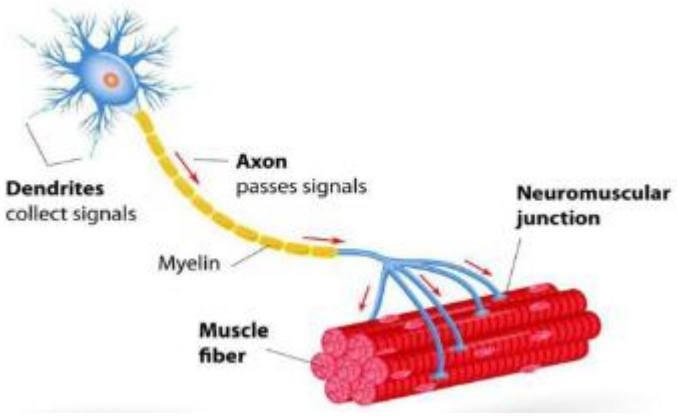

Versión de Prueba
Wondershare PDFelement

Especificaciones

Tipo de producto	Onda electromagnética de pulso
Pantalla	15,6 pulgadas
Frecuencia de pulso	1-250 HZ
Voltaje de pulso	500V-1500V
Relación de energía	10%-100%
Horas de funcionamiento	1-90min (ajustable)
Conmutación de frecuencia	3 tipos de interruptor de ajuste inteligente de frecuencia
Modo operativo	Modo inteligente
Método de almacenamiento	Admite tres modos de ahorro de datos
Manera de trabajar	Dos mangos funcionan al mismo tiempo/ Cuatro mangos trabajan al mismo tiempo
Tensión de funcionamiento	CA 220V-240V--, 50Hz
Poder total	6000W
Configuración del mango	2 mangos para el cuerpo, 2 mangospara las extremidades
Energía electromagnética	8 teslas
Temperatura ambiente de trabajo	-10°C 30°C
Humedad relativa de trabajo	580%
Rango de presión atmosférica	700hPa-1060hPa

Accesorios



Cualquier parte del instrumento hecha de material PMMA (por ejemplo: balda de accesorios, panel, tiradores transparentes, etc.).
No use alcohol ni solventes corrosivos para limpiar el trabajo y manipular el marco de

LISTA DE EMPAQUE

1.Anfitrión

2. Mango de trabajo
3. Manual de usuario
4. Encuadernación
5. Marco de accesorios
6. Llave de tornillo hexagonal

Versión de Prueba
Wondershare PDFelement

Detalles de producto



Ventajas

La tecnología de enfriamiento continuo hace que el cabezal de tratamiento no produzca altas temperaturas, mejorando en gran que sea muy estable.
Los instrumentos de ondas magnéticas del mercado son generalmente solo 2.5-3.0 Tesla, mientras que la delgadez magnética se puede ajustar hasta 8 Tesla. La tasa de salida de energía continua perfectamente equilibrada es absolutamente sin palabras en los equipos de musculación en el mercado.



Versión de Prueba Wondershare PDFelement

Pacientes prohibidos

1.Pacientes con enfermedad cardíaca, marcapasos cardíaco, presión arterial alta;
2. Inflamación aguda, trombosis venosa profunda, inflamación de la tiroides, asma, cáncer, etc.; c3. Personas con vasos sanguíneos rotos, heridas y heridas sangrantes;
4. Mujeres embarazadas y niños;
5. Áreas con rellenos artificiales en el cuerpo que se han sometido a cirugía estética;
6. Personas con materiales metálicos en el cuerpo humano;
7. Los que tienen inflamación de la piel e hinchazón del cuerpo;
8. Personas con funcionamiento anormal del sistema inmunitario;
9. Personas que se sienten entumecidas y que no responden al calor.
10.0 Está prohibida la operación en la cabeza, el pecho, los pulmones, el corazón y el ombligo.

Q & A

P: ¿Quién es adecuado para la máquina de belleza reductora?
R: Esta técnica puede proporcionar un estiramiento muscular beneficioso para la mayoría de las personas. Solo las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir tratamiento; Para las mujeres que están cerca de la menstruación, si reciben tratamiento, la menstruación puede llegar antes o pueden experimentar calambres abdominales más fuertes. Por lo tanto, recomendamos que eviten el tratamiento durante este período. Si el cuerpo está bajo las siguientes condiciones, las personas no pueden recibir tratamiento: implantes metálicos o electrónicos en el sitio de tratamiento, implante de marcapasos, implante de desfibrilador, implante de neuroestimulador, implante de bomba de drogas, Inflamación maligna , epilepsia, cirugía reciente.

P: ¿Qué partes del cuerpo se pueden usar con una máquina de belleza reductora?
R: fue aprobado por la FDA, puede mejorar las líneas musculares de las nalgas y el abdomen, y también ayudar a promover el metabolismo de las grasas. Las partes más adecuadas son: abdomen, glúteos, tríceps.

P: ¿Qué deben preparar los usuarios para usar la máquina de belleza delgada?
R: Se recomienda que los usuarios usen ropa cómoda para que puedan colocarse flexiblemente en el proceso.

P: ¿Duele?
R: El programa en sí es indoloro. No hay necesidad de anestesia. Solo acuéstese y use dos paneles al mismo tiempo para aplicar energía electromagnética enfocada de alta intensidad. La sensación durante el tratamiento es mejor en comparación con la sensación muscular durante el ejercicio intenso.
P: ¿Es seguro?
R: Ha obtenido la doble certificación de seguridad y eficacia de FDA y CE, y el proceso es indoloro y no invasivo.
P: ¿En cuánto tiempo verá el efecto después del tratamiento?
R: Algunos usuarios encontraron que la línea de los músculos abdominales había mejorado un día después del tratamiento.

Versión de Prueba Wondershare PDFelement

Para lograr el efecto de descomponer la grasa y aumentar la masa muscular, se necesitaron 4 tratamientos. El mejor efecto es de 2 a 4 semanas después del curso del tratamiento. Después del tratamiento, puede reducir la grasa en un 19% y aumentar la masa muscular en un 16%.

P: ¿Cuánto tiempo puede durar el efecto?
R: Tomándolo 4 veces, el efecto puede durar hasta seis meses. Pero algunas personas pueden necesitar tratamientos adicionales para obtener mejores resultados. Si toma el curso cada 2-3 meses, puede mantener mejor la estadística óptima

Mantenimiento y reparación

1. Los equipos médicos o electrodomésticos cercanos al instrumento pueden funcionar mal debido a interferencias.
2. Está prohibido utilizar este instrumento en los siguientes entornos:
   Alta temperatura y ambiente húmedo;
   Un ambiente con mucho humo aceitoso o vapor de agua;

-Ambiente polvoso;

3. Si ocurre un mal funcionamiento durante el uso, la alimentación debe apagarse inmediatamente y debe

ser desmontado y reparado por profesionales, o enviado al distribuidor,

El fabricante no lo repara por sí mismo.

4. Exención de responsabilidad

(1) Por la ocurrencia de circunstancias irresistibles como incendios, terremotos y guerras;
(2) Por culpa del usuario o mala operación;
(3) Daños causados por el uso de métodos distintos a los de este manual;
(4) No seguir las instrucciones de este manual.

Posventa

1. Garantía: La fecha de garantía es de dos años a partir de la fecha de compra. Somos responsables del mantenimiento en nuestras instalaciones en China. Cuando vence la fecha de la garantía, cobraremos la tarifa de servicio o el costo del componente.

2. Uso profesional: La mercancía de nuestros Productos está diseñada solo para uso profesional y debe ser instalada por un electricista profesional con licencia. El no hacerlo anulará la garantía.

3. Defectos del fabricante: en el caso de defectos en los materiales y la mano de obra, nuestra obligación se limitará a la mano de obra y la reparación o el reemplazo gratuitos de las piezas, únicamente a nuestra discreción, de cualquier pieza defectuosa durante un período de un año a partir de la fecha de compra.

4. Liberación de responsabilidad por daños y perjuicios: Los recursos proporcionados en este documento son los únicos y exclusivos recursos del comprador y en ningún caso nuestros productos serán responsables de daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales,

Versión de Prueba Wondershare PDFelement

daños potenciales (incluida la pérdida de beneficios) ya sea por contrato, agravio o cualquier otra teoría legal.

5. Devoluciones: Todas las máquinas dañadas deben devolverse en 30 días después de recibir la confirmación de nuestro departamento de servicio.

6. Política de Envío: Para su protección, la aceptación de este envío por parte de la Compañía de Transporte es un reconocimiento de que los artículos les fueron entregados en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente embalados.

7. Excepciones

– Daño inapropiado como: impacto dramático, vibración, caída, quema de la cámara del condensador, destrucción de las varillas de cristal, etc.

– Daño inapropiado o pérdida de componentes clave como la pieza de mano, gafas protectoras, líneas eléctricas, se le cobrará el costo de los accesorios.

– Consumidor que repara la máquina causado por uso impropio por sí mismo.

– Debido a fuerzas irresistibles (como incendios, terremotos y otros desastres naturales) de daños.

– Más allá del período de garantía de los productos.